

VITÁLE®

SILICONE COVER DRESSINGS

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION

Vitale® Silicone Cover Dressings are absorbent, have a non-traumatic silicone border, and provide an ideal cover for wounds of many types. They are soft and flexible dressings that are very comfortable on fragile skin, and have a long wear time. These dressings are indicated as a secondary dressing to cover primary treatments & dressings, or as a primary dressing on minor wounds, skin tears, etc. They assist in protecting the wound and preventing bacterial contamination or maceration.

Vitale® Silicone Cover Dressings have an absorbent non-adherent pad in the center, held firmly in place by the silicone, uniquely formed in an oval shape open to the passage of fluids into the pad. The silicone adhesive allows easy & safe removal of the dressing at change time, without trauma to the patient. The soft and strong backing is made from flexible polyurethane that provides a waterproof barrier. This breathable film allows gases, including water vapor, to escape the dressing.

Vitale® Silicone Cover Dressings are available in a selection of convenient sizes. They are sterilized by ethylene oxide and must not be resterilized.

INDICATIONS

Vitale® Silicone Cover Dressings are for single use only and can be used to cover primary dressings and protect many types of wounds:

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
|  | Superficial to Full Thickness | <ul style="list-style-type: none">• Pressure Sores• Arterial Ulcers• Venous Ulcers |
|  | Dry to Highly Exuding Wounds | <ul style="list-style-type: none">• Diabetic Ulcers• Post-Operative Wounds• Skin Donor Site• Second Degree Burns• Post-Surgery Sites• Minor Wounds & Lacerations |

SIDE EFFECTS & INTERACTIONS

None have been observed to date.

STORAGE

Vitale® Silicone Cover Dressings should be stored in a cool & dry area. The products are sterile unless the package is opened or damaged.

APPLICATION



PRODUCT LINE

CATALOG NUMBER	DESCRIPTION	SIZE	UNITS/BOX
24704	Vitale® Silicone Cover Dressing	3.5"x 4" (9 cm x 10 cm)	30
24707	Vitale® Silicone Cover Dressing	6" x 7" (15 cm x 17.5 cm)	30

APÓSITO CUBIERTA DE SILICONA

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los apósitos con cobertura de silicona Vitále® son absorbentes, tienen un borde de silicona no traumático, y proporcionan una cubierta ideal para lesiones de diferentes tipos. Son apósitos suaves y flexibles muy cómodos sobre la piel frágil, y tienen un tiempo de uso largo. Estos apósitos están indicados como un apósito secundario para cubrir los apósitos y tratamientos principales, o como apósito principal sobre heridas menores, lesiones cutáneas laceradas, etc. Ayudan a proteger la herida y evitan la contaminación bacteriana o la maceración.

Los apósitos con cobertura de silicona Vitále® tienen una almohadilla no adherente en el centro, se mantienen firmes en el lugar gracias a la silicona con una forma especial de óvalo para permitir el paso de fluidos a la almohadilla. El adhesivo de silicona permite quitarlos de forma fácil y segura al momento del cambio, sin ocasionar un traumatismo en el paciente. La parte trasera suave y resistente está hecha de un poliuretano flexible que proporciona una barrera a prueba de agua. Esta película transpirable permite que los gases, incluido el vapor de agua, atraviesen y salgan del apósito.

Los apósitos con cobertura de silicona Vitále® están disponibles en una gama de tamaños convenientes. Son esterilizados mediante óxido de etileno y no deben esterilizarse de nuevo.

INDICACIONES

Los apósitos con cobertura de silicona Vitále® son de único uso y se los puede usar para cubrir apósitos principales y proteger distintos tipos de heridas, como las siguientes:



De espesor superficial a total



Secado de exudación alta

- Llagas por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Úlceras por diabetes
- Lesiones postquirúrgicas
- Área de donación de piel
- Quemaduras de segundo grado
- Área posquirúrgica
- Lesiones y laceraciones menores


EFFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES

No se han observado hasta la fecha.


ALMACENAMIENTO

Los apósitos con cobertura de silicona Vitále® deben almacenarse en un área fresca y seca. Los productos son estériles, a menos que el paquete esté abierto o dañado.


APLICACIÓN

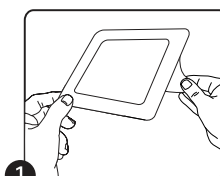

1 Primero retire la lámina central de la película protectora (o un lado para los dos tamaños más pequeños).

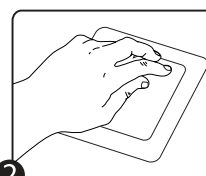

2 Coloque el centro del apósito sobre el área y adhiera un lado.

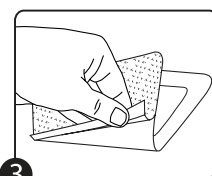

3 Retire el remanente de la película protectora y adhiera el apósito.

LINEA DE PRODUCTOS

NUMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UNIDADES/CAJA
24704	Apósitos con cobertura de silicona Vitále®	3.5"x 4" (9 cm x 10 cm)	30
24707	Apósitos con cobertura de silicona Vitále®	6" x 7" (15 cm x 17.5 cm)	30



CELLERA

CINCINNATI, OH

www.CELLERALLC.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con óxido de etileno



No volver a esterilizar



No fabricado con látex de caucho natural