

AVANOS*

MIC-KEY* MEDICATION EXTENSION SET WITH ENFit® CONNECTORS

Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.


Single Patient Use Only.

⚠ Warning: For enteral nutrition and/or medication (Rx) only.

The MIC-KEY* Extension Sets with ENFit® Connectors are intended to connect to the MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube, Enteral Feeding Syringes with ENFit® Connectors, and Feed Administration Bags with ENFit® Connectors.

SECUR-LOK* Right Angle Connector

2 Port "Y" ENFit® Connectors

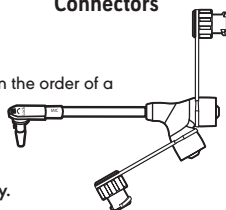

Nonsterile	Not made with natural rubber latex	Product is NOT made with DEHP as a plasticizer	Rx Only
Caution	Consult instructions for use	2797	0142-02

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667). www.avanos.com

Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

EC REF Avanos Medical Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.

Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd, 475 Victoria Avenue, Chatswood, NSW 2067 Australia.


*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

© 2018 AVNS. All rights reserved. 2020-06-25

15-M1-332-02 / 50000256

www.mic-key.com

- (FR) Prolongateur MIC-KEY* (pour l'administration de médicaments) avec connecteurs ENFit®, connecteur à angle droit SECUR-LOK* et connecteurs ENFit® en « Y » à 2 orifices • Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. • Ce produit n'est pas fabriqué à partir de DEHP comme plastifiant. • Rx Only: Sur ordonnance uniquement : aux États-Unis, la loi fédérale restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur son ordonnance. • Destiné à un seul patient. • ⚠ Avertissement : Pour alimentation et/ou administration de médicaments (Rx) par voie entérale uniquement. • Les prolongateurs MIC-KEY* avec connecteurs ENFit® sont prévus pour se connecter sur la sonde d'alimentation gastrostomique extra-plate MIC-KEY*, les seringues d'alimentation entérale avec connecteurs ENFit® et les sachets d'administration d'alimentation avec connecteurs ENFit®.
- (DE) MIC-KEY* Medikamentenabgabe-Verlängerungsset mit ENFit® Verbindungsstücken, SECUR-LOK* rechtwinkligem Verbindungsstück und 2 Port-„Y“-ENFit® Verbindungsstücken • Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. • Das Produkt ist nicht mit DEHP als Weichmacher hergestellt. • Rx Only: Verschreibungspflichtig: Laut US-amerikanischem Recht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden. • Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten. • ⚠ Warnung: Nur zur enteralen Ernährung und/oder Verabreichung von Medikamenten (Rx). • Die MIC-KEY* Verlängerungssets mit ENFit® Verbindungsstücken sind zum Anschluss an MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomie-Ernährungs sonden, enterale Ernährungsspritzen mit ENFit® Verbindungsstücken und Ernährungsbeutel mit ENFit® Verbindungsstücken gedacht.
- (BG) MIC-KEY* комплект удължител за прилагане на медикаменти с ENFit® конектори, SECUR-LOK* конектор под прав ъгъл и Y-образни конектори ENFit® с два порта • При производството не е използван латекс от естествено каучук. • Този продукт не съдържа DEHP (ди(2-етилхексил) фталат) като пластификатор. • Rx Only: Само Rx: Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това изделие от или по нареждане на лекар. • За употреба само от един пациент. • ⚠ Предупреждение: само за ентéralно хранене и/или прилагане на медикаменти (Rx). • Комплекта удължител MIC-KEY* с ENFit® конектори са предназначени за свързване към нископрофилни гастростомни хранителни сонди MIC-KEY*, спринцовки за ентéralно хранене с ENFit® конектори и торбички за изкуствено хранене с ENFit® конектори.
- (ES) Juego de extensión para medicamentos MIC-KEY* con Conectores ENFit®, Conector de ángulo recto SECUR-LOK* y Conectores bifurcados de dos puertos ENFit® • No fabricado con látex de goma natural. • El producto no está fabricado con DEHP como plastificador. • Rx Only: Venta sólo por receta facultativa. Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o por receta facultativa. • Uso indicado: para un solo paciente • ⚠ Advertencia: Sólo para alimentación enteral y/o medicamentos recetados (Rx). • Los juegos de extensión MIC-KEY* con Conectores ENFit® están hechos para conectar con el tubo de alimentación por gastrostomía de perfil plano MIC-KEY*, las jeringas para alimentación enteral con Conectores ENFit® y las Bolsas para administrar alimento con conectores ENFit®.
- (CS) Prodlužovací souprava MIC-KEY* na podávání léků s konektory ENFit®, pravouhlým konektorem SECUR-LOK* a 2 otvory tvaru „Y“ na konektory ENFit® • Vyrobeno bez přírodního gumového latexu. • Produkt není vyroben s DEHP jako plastifikátorem. • Rx Only: Pouze na předpis: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jeho předpis. • Pouze pro použití u jediného pacienta. • ⚠ Varování: Pouze pro enterální výživu a/nebo léky (Rx). • Prodlužovací soupravy MIC-KEY* s konektory ENFit® jsou určeny pro spojení s nízkoprofilovou gastrostomickou výživovou trubicí MIC-KEY*, enterálními výživovými stříkačkami s konektory ENFit® a sáčky na podávání výživy s konektory ENFit®.

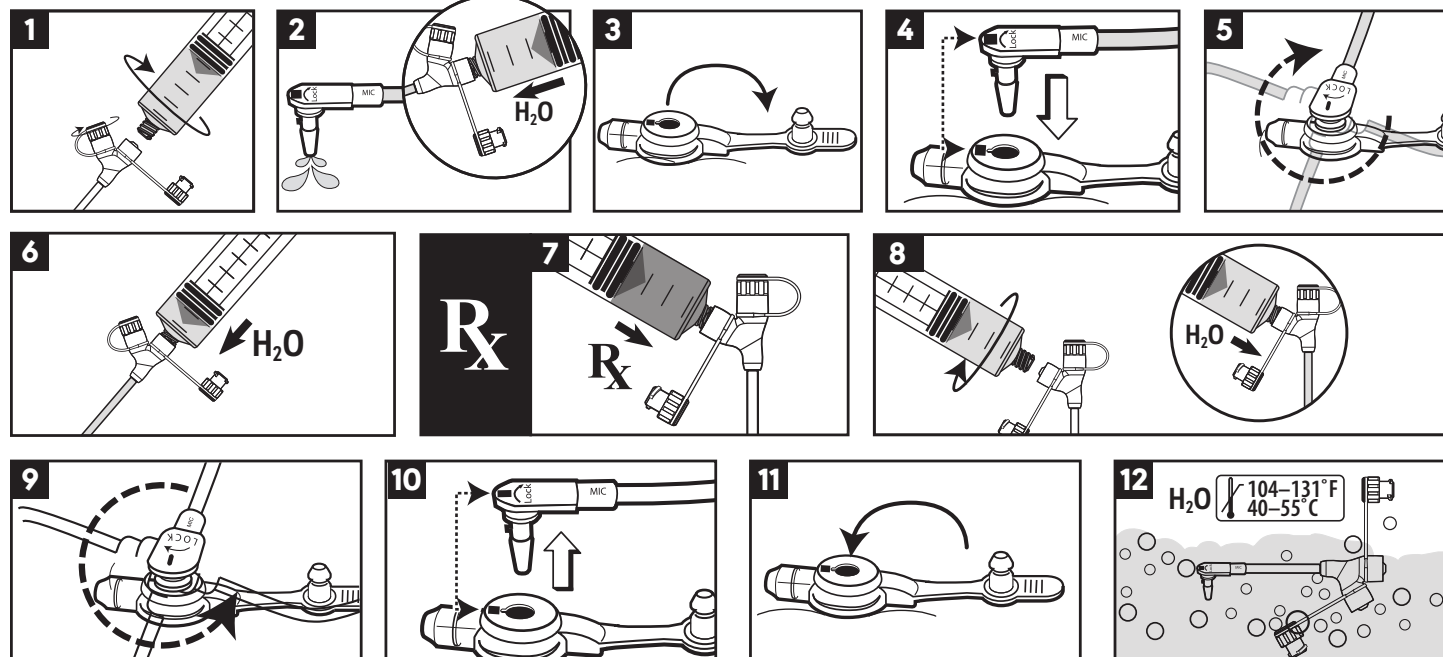

- (DA)** MIC-KEY® medicinindgivelsesforlænger med ENFit® fittings, SECUR-LOK® vinkelstuds og strømte med ENFit® fittings. • Ikke fremstillet af naturgummilætex. • Ikke fremstillet med DEHP blodgruppemiddel. • Rx Only: Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordination af en læge. • Kun beregnet til brug på én patient. • **⚠ Advarsel: Kun beregnet til enteral ernærings- og lægemiddelindgivelse (Rx).** • MIC-KEY® forlængere med ENFit® fittings er beregnet til tilslutning til MIC-KEY® gastrostomierneringssonder med lav profil, enterale ernæringsprøjter med ENFit® fittings og ernæringsposer med ENFit® fittings.
- (ET)** MIC-KEY® ravimite manustamise pikenduskomplekt ENFit® konnektorite, SECUR-LOK® täisnurkse konnektori ja 2 avaga, Y®-kujuliste ENFit® konnektoritega. • Ei ole valmistatud looduslikust kummilakestist. • Toote valmistamiseks ei ole plastifikaatorina kasutatud DEHP-d. • Rx Only: Ainult Rx: USA föderaalseadused lubavad seda seadet müüa ainult arstidel või arsti korraldusel. • Kasutamiseks ainult ühel patsiendil. • **⚠ Hoiatust: ainult enteraalseks toitmiseks ja/või ravimil manustamiseks (Rx).** • ENFit® konnektoriga MIC-KEY® pikenduskomplektid on mõeldud ENFit® madala profiiliga gastrostoomia toitesondi, ENFit® konnektoriga enteraalse toitmise süstalde ja ENFit® konnektoriga toidu manustamise kottide ühendamiseks.
- (EL)** ΣΕΤ προέκτασης για χορήγηση φαρμάκων MIC-KEY® με συνδέσμους ENFit®, σύνδεσμο ορθής γωνίας SECUR-LOK® και εξάρτημα 2 θυρών σχήματος «Y» με συνδέσμους ENFit® • Δεν παρασκευάζονται με φυσικό ελαστικό λάτεξ. • Το προϊόν δεν κατασκευάζεται με χρήση φθαλικών αλάτων (DEHP) ως πλαστικοποιητή. • Rx Only: Μόνο με συνταγή ιατρού: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής μόνο από ιατρό ή με συνταγή ιατρού. • Για χρήση σε έναν ασθενή μόνο. • **⚠ Προειδοποίηση: Αποκλειστικά για εντερική σίτιση και/ή χορήγηση φαρμάκων (Rx).** • Τα Σετ προέκτασης MIC-KEY® με συνδέσμους ENFit® προορίζονται για σύνδεση με τον Σωλήνα σίτισης μέσω γαστροστομίας χαμηλού προφίλ MIC-KEY®, τις Σύριγγες εντερικής σίτισης με συνδέσμους ENFit®, και τους Ακούσις χορήγησης σίτισης με συνδέσμους ENFit®.
- (IT)** Set di estensione per farmaci MIC-KEY® con connettori ENFit®, connettore ad angolo retto SECUR-LOK® e connettori ENFit® con raccordo a "Y" a 2 porte • Non fabbricato in lattice di gomma naturale. • Questo prodotto non è realizzato con DEHP come plastificante. • Rx Only: Solo dietro prescrizione medica: la normativa federale statunitense limita la vendita del presente dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione di un medico. • Da usarsi esclusivamente su un singolo paziente. • **⚠ Avvertenza - Esclusivamente per la somministrazione di nutrizione e/o farmaci per via enterale (Rx).** • I set di estensione MIC-KEY® con connettori ENFit® si collegano al tubo MIC-KEY® a basso profilo per alimentazione tramite gastrostomia, alle siringhe per nutrizione enterale con connettori ENFit® e alle sacche di alimentazione con connettori ENFit®.
- (LV)** MIC-KEY® medikamentu pagarinājuma komplekts ar ENFit® savienotājiem, SECUR-LOK® taisnleņķa savienotāju un 2 portu Y® ENFit® savienotājiem • Nav izgatavots no dabīgās gumijas lateksa. • Izstrādājums nav izgatavots ar DEHP kā plastifikatoru. • Rx Only: Tikai ar ārsta recepti: ASV federālās likums nosaka šīs ierīces pārdošanu tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma. • Lietot tikai vienam pacientam. • **⚠ Bīdījumā: Tikai enterālai barošanai un/vai receptu sāļu ievadei (Rx).** • MIC-KEY® pagarinājuma komplekti ar ENFit® savienotājiem ir paredzēti savienojumam ar MIC-KEY® kompakt gastrostomijas barošanas zondi, enterālās barošanas šļircēm ar ENFit® savienotājiem, un barošanas maisījumi ar ENFit® savienotājiem.
- (LT)** MIC-KEY® ilginamasis vaistų leidimo priedas su ENFit® jungtimis, stačiakampis SECUR-LOK® jungtimi ir ENFit® dvivakio Y adapteriu • Pagaminta be natūralio kaučiuko lateksu. • Gaminyo pagaminimas nenaudojant plastikių DEHP. • Rx Only: Receptinis prietaisas – federaliniai (JAV) įstatymai numato, kad šį įtaisą galima parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu. • Naudooti tik vienam ligoniui. • **⚠ Įspėjimas! Skirta tik enterinei mitybai ir (ar) vaistams (Rx).** • MIC-KEY® ilginamieji priedai su ENFit® jungtimis yra skirti prijungti prie MIC-KEY® kompaktiškų gastrostominio maitinimo zondu, enterinio maitinimo švirkštų su ENFit® jungtimis ir lašinio maitinimo maišų su ENFit® jungtimis.
- (HU)** MIC-KEY® gyógyszeradagolóhosszabbító-készlet ENFit® csatlakozóval, SECUR-LOK® jobb boka csatlakozóval és 2 portos, Y® ENFit® csatlakozóval • Nem természetes latexgumiból készült. • A termék nem tartalmaz DEHP (di-(2-ethylhexil)-ftalát) lágyítószert. • Rx Only: Kizárólag orvosi rendeltvényre: Az (Amerikai Egyesült Államok) szövetségi törvényei értelmében az eszköz csak orvos által vagy orvosi rendeltvényre értékesíthető. • Egyyszerű használatos. • **⚠ Figyelem: Csak belső táplálásra és/vagy gyógyszeradagolásra (Rx).** • Az ENFit® csatlakozóval ellátott MIC-KEY® hosszabbító-készlet csatlakoztatható a MIC-KEY® alacsony profilú gastrostómiai adagolószálhoz, az enterális tápláláshoz használt, ENFit® csatlakozóval ellátott fecskendőhöz és az ENFit® csatlakozóval ellátott adagolószálhoz.
- (NL)** MIC-KEY® verlengsets voor medicatie met ENFit®-verbindingstukken, SECUR-LOK® haaks verbindingstuk en ENFit®-verbindingstukken met 2-poorts Y®-stuk • Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. • Het product is niet vervaardigd met DEHP als weekmaker. • Rx Only: Uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar: Volgens de federale wetgeving (van de Verenigde Staten) mag dit medische hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht. • Uitsluitend voor gebruik bij een enkele patiënt. • **⚠ Waarschuwing: uitsluitend voor enterale voeding en/of medicatie (Rx).** • De MIC-KEY®-verlengsets met ENFit®-verbindingstukken dienen aangesloten te worden op de MIC-KEY®-voedingssonde met laag profiel voor gastrostomie, enterale voedingsspuiten met ENFit®-verbindingstukken en toedieningszakken van de voedingssplijning met ENFit®-verbindingstukken.
- (NO)** MIC-KEY® medisinerings utvidelsessett med ENFit® koblinger, SECUR-LOK® rett vinkel og 2 port Y® ENFit® koblinger • Ikke laget med naturgummilateks. • Produktet er ikke produsert med DEHP som plastiseringsmiddel. • Rx Only: Fås kun på resept: Amerikansk federal lov begrenser dette apparatet til salg til eller på ordre fra lege. • Kun for engangsbruk. • **⚠ Advarsel: Kun for enteral næring og medisinerings (Rx).** • MIC-KEY® utvidelsessett med ENFit® koblinger er beregnet for å kobles til MIC-KEY® lavprofil materer, enterale matesprøyter med ENFit® koblinger og næringsadministreringsposer med ENFit® koblinger.
- (PL)** Zestawy przedłużające do zgłębników MIC-KEY® do podawania leków – ze złączem ENFit®, złączem SECUR-LOK® pod kątem prostym i 2 portami typu Y® ENFit® • Wyprodukowano bez lateksu naturalnego. • Produkt nie jest wytwarzany z użyciem DEHP jako środka uplastyczniającego. • Rx Only: Wyłącznie na receptę: Zgodnie z prawem federalnym (w USA) urządzenie to może być sprzedawane wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie. • Do użytku tylko u jednego pacjenta. • **⚠ Ostrzeżenie: Wyłącznie do żywienia dojelitowego oraz/lub podawania leków (Rx).** • Zestawy przedłużające MIC-KEY® ze złączami ENFit® przeznaczone są do niskoprofilowych zgłębników gastrostomijnych MIC-KEY®, strzykawek do żywienia dojelitowego ze złączami ENFit® i worków wypełnionych preparatem żywieniowym ze złączem ENFit®.
- (PT)** Conjunto de extensão para medicação MIC-KEY® com conectores ENFit®, conector em ângulo recto SECUR-LOK® e 2 conectores MIC-KEY® com dois orifícios em Y® • Não são feitas com látex de borracha natural. • Este produto não é fabricado com di-etilhexil ftalato (DEHP) como plastificante. • Rx Only: Apenas sob receita médica: A lei federal (E.U.A.) limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico. • Apenas para utilização única. • **⚠ Advertência: para alimentação e/ou administração de medicamentos (Rx) apenas**

- por via entérica. • Os conjuntos de extensão MIC-KEY® com conectores ENFit® destinam-se a ligar ao tubo para alimentação por gastrostomia pouco visível MIC-KEY®, às seringas para alimentação por via entérica com conectores ENFit® e aos sacos para administração de alimentos com conectores ENFit®.
- (RO)** Set prelungitor MIC-KEY® pentru medicație, cu conectori ENFit®, conector în unghi drept SECUR-LOK® și adaptor în Y cu 2 porturi ENFit® • Nu este produs din latex din cauciuc natural. • Acest produs nu conține DEHP ca plastifiant. • Rx Only: Doar Rx: Conform legii federale S.U.A., acest dispozitiv poate fi vândut numai de către un medic sau la ordinele acestuia. • A se utiliza numai la un singur pacient. • **⚠ Avertizare: Numai pentru alimentare și/sau medicație enterică (Rx).** • Seturile prelungitoare MIC-KEY® cu conectori ENFit® sunt destinate conectorii la tubul simplu de alimentare gastrostomică MIC-KEY®, seringile de alimentare enterală cu conectori ENFit® și pungile de alimentare cu conectori ENFit®.
- (RU)** Удлинительный набор для ввода лекарственных средств MIC-KEY® с разъемными ENFit®, прямоугольным разъемом SECUR-LOK® и 2 "Y"-образными каналами ENFit® • При изготовлении не использовался натуральный латекс. • Изделие не содержит диэтилгексилфталата (DEHP) в качестве пластификатора. • Rx Only: Отпускается только по предписанию врача. Согласно федеральному законодательству США, данное устройство подлежит продаже только врачам или по их заказу. • Предназначено для использования только у одного пациента. • **⚠ Предостережения: Предназначено только для введения составов для парентерального питания и лекарственных средств (Rx).** • Удлинительные наборы MIC-KEY® с разъемными ENFit® предназначены для соединения с низкопрофильной гастростомической питательной трубкой MIC-KEY®, шприцами для парентерального питания с разъемными ENFit®, а также с пакетами для ввода питания с разъемными ENFit®.
- (SK)** Predlžovacia súprava MIC-KEY® na podávanie liekov s konektormi ENFit®, pravouhlým konektorm SECUR-LOK® a 2 otvormi tvaru „Y“ na konektory ENFit® • Vyrobené bez prírodného gumového latexu. • Produkt nie je vyrobený s DEHP ako plastifikátorom. • Rx Only: Len na predpis: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto nástroja na lekára alebo na jeho predpis. • Len na použitie u jedného pacienta. • **⚠ Varovanie: Len pre enterálnu výživu a/alebo lieky (Rx).** • Predlžovacie súpravy MIC-KEY® s konektormi ENFit® sú určené na spojenie s nízko profilovou gastrostomickou výživovou trubicou MIC-KEY®, enterálnymi výživovými striekačkami s konektormi ENFit® a vrecami na podávanie výživy s konektormi ENFit®.
- (SL)** MIC-KEY® podaljšek za zdravilo z ENFit® konektorji, s SECUR-LOK® pravokotnim konektorjem in konektorji z dvema priključkoma „Y“ ENFit® • Ni narejeno iz kavčuka iz naravnega lateksa. • Izdelku ni dodan DEHP za mehčalec. • Rx Only: Samo na recept: Zvezni (ZDA) zakon predpisuje, da sme ta pripomoček prodati samo zdravnik oz. se ga lahko proda samo po naročilu zdravnika. • Za uporabo na samo enem bolniku. • **⚠ Opozorilo: Samo za enteralno hranjenje in/ali dajanje zdravil (Rx).** • MIC-KEY® podaljški z ENFit® konektorji so namenjeni povezavi z MIC-KEY® gastrostomsko cevko za hranjenje z nizkim profilom, enteralnimi brizgalkami za hranjenje z ENFit® konektorji in vrečkami za dovajanje hrane z ENFit® konektorji.
- (FI)** MIC-KEY®-lääkintäjaksoja, jossa on ENFit®-liittimet, SECUR-LOK®-suorakulmailitin ja 2-porttinen ENFit®-Y-liitin • Ei valmistettu luonnonkummilakeksista. • Tuotetta ei ole valmistettu käyttämällä DEHP:tä pehmittimenä. • Rx Only: Ainoastaan reseptillä: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laaitteen myytäväksi lääkärien toimesta tai määräyksellä. • Potilaskohtainen. • **⚠ Varoitus: Vain enteraalista ruokintaa tai lääkitystä (Rx) varten.** • MIC-KEY®-jaksoarjat, joissa on ENFit®-liittimet, on tarkoitettu liitettäväksi seuraaviin: matalaprofilinen MIC-KEY®-maha-avanneruokintaletku, enteraaliset ruokintaruisut, joissa on ENFit®-liittimet, ja ruokintapussit, joissa on ENFit®-liittimet.
- (SV)** MIC-KEY® förlängningsset för medicinerings, med ENFit®-kopplingar, SECUR-LOK® rätvinkelkoppling och Y-port med 2 ENFit®-kopplingar • Ej tillverkad med naturgummilætex. • Denna produkt är INTE tillverkad med DEHP som plastjuggörare. • Rx Only: Endast på förskrivning av läkare: Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare. • Endast för användning till en patient. • **⚠ Varning! Endast för enteral näringstillförsel och/eller (Rx) medicinerings.** • MIC-KEY® förlängningsset med ENFit®-kopplingar är avsedda att anslutas till MIC-KEY® gastrostomison d i läppprofil, sondsprutor för enteral näringstillförsel med ENFit®-kopplingar, samt sondmatningspåsar med ENFit®-kopplingar.
- (TR)** MIC-KEY® Konnektörlü İlaç Uzatma Seti, SECUR-LOK® Dik Açılı Konnektör ve 2 Port Y® ENFit® Konnektör • Doğal kauçuk lateksten imal edilmemiştir. • Bu ürün plastikleştirici olarak DEHP kullanılarak üretilmemiştir. • Rx Only: Yalnızca Reçete ile: Federal (A.B.D) kanunları bu cihazın bizzat hekim tarafından veya hekim talimatı üzerine satışı yasaklamaktadır. • Sadece Tek Hastalıkları Kullanım İçindir. • **⚠ Uyarı: Sadece enteral besleme ve/veya ilaç (Rx) için.** • MIC-KEY® ENFit® Konnektörlü Uzatma setleri MIC-KEY® ENFit® Konnektörlü Düşük Profil Gastrostomi Besleme Borusu, Enteral Besleme Şırıngaları ve ENFit® Konnektörlü Besleme Uygulama Çantaları ile bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
- (JA)** MIC-KEY® 投薬エクステンションセット (ENFit®コネクター、SECUR-LOK®直角コネクター、2ポート[Y]ENFit®コネクター付き) • 天然ゴムラテックス製ではありません。製品のみ可塑剤にDEHPを使用していません。• Rx Only: 処方による使用のみ(米国): 米国連邦法では、本装置の販売先は医師自身あるいは医師の指示を受けた者に限られます。• 再使用禁止。• 再使用禁止。• **⚠ 警告: 経腸栄養剤 / 薬剤専用 (Rx).** • MIC-KEY®エクステンションセット (ENFit®コネクター付き) は、MIC-KEY®コーロファイル胃瘻栄養補給チューブ、経腸栄養補給シリッジ (ENFit®コネクター付き)、栄養補給投与バッグ (ENFit®コネクター付き) と接続するために使用されます。
- (KO)** MIC-KEY® 투약 연장 세트, ENFit® 커넥터, SECUR-LOK® 직각 커넥터, 2개 Port Y® ENFit® 커넥터 포함 • 천연 고무 라텍스로 제조하지 않음. • 가소제로서 DEHP로 제품을 제조하지 않았습니다. • Rx Only: 처방 전용: 미국 연방법에 따라 이 장치는 의사가 직접 판매하거나 의사의 지시에 따라 판매될 수 있습니다. • 한 명의 환자에게만 사용하십시오. • **⚠ 경고: 경장영양 및/또는 의약품(Rx)에 한함.** • ENFit® 커넥터가 포함된 MIC-KEY® 연장 세트는 MIC-KEY® 소형 위루 금식 튜브, ENFit® 커넥터가 포함된 경장 금식 튜브, ENFit® 커넥터가 포함된 금식 투여 백에 연결하기 위한 제품입니다.